

ユリ케어Ⅲ (閉鎖式導尿バッグ)



閉鎖式導尿バッグ


URICAREⅢ

ユリ케어Ⅲ



URICAREⅢ 閉鎖式導尿バッグ

(エチレンオキシサイトガス滅菌済)

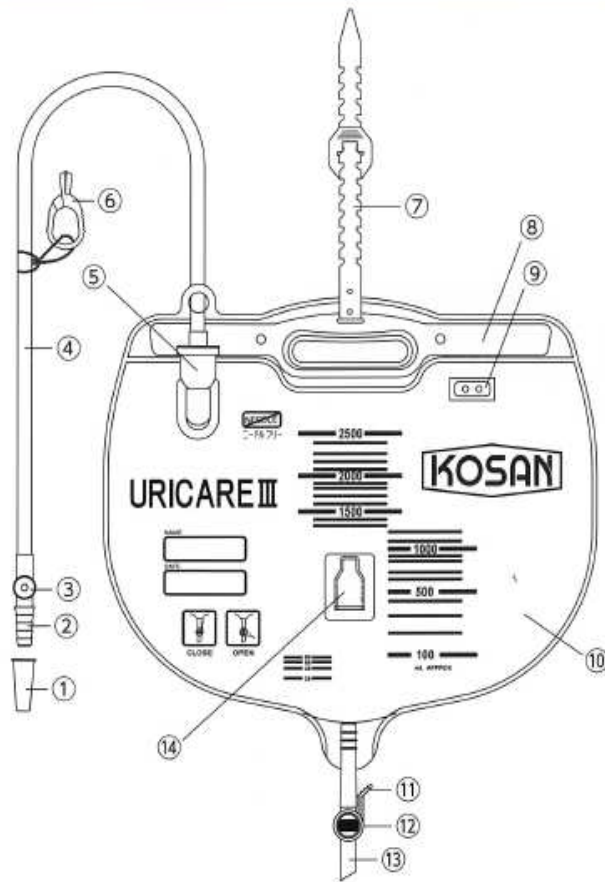

★部位名称

- ① コネクターキャップ
- ② コネクター
- ③ ニードルフリー サンプルポート
- ④ 導尿チューブ
- ⑤ ドリップチャンバー
- ⑥ クリップ
- ⑦ 吊りバンド
- ⑧ ハンガー
- ⑨ エア抜きフィルター
- ⑩ 尿バッグ本体
- ⑪ コックハンドル
- ⑫ 排尿コック
- ⑬ 排尿チューブ
- ⑭ 排尿チューブホルダー



ニードルフリー
サンプルポート



排尿コック

》特徴

POINT.01 バッグ

- ・低床ベッドに対応したローハイト設計です。
- ・排尿をよりスムーズにするためにラウンド形状を採用しました。
- ・容量は大容量の2500mLです。

POINT.02 サンプルポート

- ・注射針を使用せずに排尿できるニードルフリーのポートです。
- ・透明コネクターで尿の流れが確認できます。

POINT.03 ドリップチャンバー

- ・ダブルドリップ方式により逆行性感染のリスク低減が期待できます。

POINT.04 導尿チューブ

- ・対キンキング性が向上したチューブを採用。

POINT.05 排尿コック

- ・排尿コックは片手で操作が可能です。
- ・上向き収納でコック内に残った尿が垂れてくるのを防ぎます。

POINT.06 メタルフリー

- ・全パーツにおいて金属素材を使用しておりません。
- ・MRI検査、CT検査等の際にも安心です。

》使用上の注意

- 本品はディスプレイ製品ですので、ご使用は一回限りで再使用しないでください。
- 導尿チューブは折ったりつぶしたりしないようにしてください。
- ご使用前に排尿コックのコックハンドルが完全に閉じていることを確認してください。
- バッグは身体よりも低い位置になるよう取り付けてください。尿の逆流や尿の停滞が起こり、膀胱に損傷を与える恐れがあります。
- 包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。

》規格

製品番号	04500004
品名	ユリケアーⅢ (URICAREⅢ)
容量	2500mL
入数	10個入り/箱
JANコード	4546588620040

KOSAN 恒産商事株式会社
KOSAN CORPORATION

本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里6-11-7
TEL.03-3800-4631

大阪営業所 〒530-0043 大阪市北区天満 3-9-15
TEL.06-6352-6991

取扱店



品番	0391300005
JANコード	4546588620040
標準価格	オープン価格
入数	10個/箱

特徴

- ・低床ベッドに対応したローハイト設計
- ・注射針を使用せずに採尿できるニードルフリーのサンプルポート
- ・ダブルドリップ方式により逆行性感染リスクの低減が期待できます
- ・排尿コックは片手で操作が可能
- ・上向き収納でコック内に残った尿が垂れてくるのを防ぎます
- ・EOG滅菌済

仕様

- ・容量2500ml
- ・メタルフリー